



iPhone · Apple Watch App

我的血壓

使用說明書

血壓紀錄 · 吃藥提醒 · 回診慢箋
給長輩，也給關心長輩的家人



目錄

第 1 章 認識「我的血壓」	3
使用前準備：系統需求與正確量血壓	4
第 2 章 快速設定	5
第 3 章 介面導覽	8
第 4 章 記錄血壓	10
手動輸入	10
拍血壓計自動帶入數字	11
量到危險值時	12
第 5 章 血壓趨勢、報告與 722 量測	13
「血壓」分頁	13
回診報告 (PDF) 與匯出 CSV	14
722 居家量測	15
第 6 章 用藥與吃藥提醒	17
新增與編輯藥物	18
第 7 章 回診與出門前檢查	20
第 8 章 慢性病連續處方箋領藥	21
第 9 章 家人關心	23
設定「漏服藥通知家人」	24
第 10 章 設定、Apple 健康、備份與 Apple Watch	25
量血壓提醒與通知	26
Apple 健康	27
備份與還原、換新手機	28
iPhone 主畫面小工具	29
Apple Watch 與錶面小工具	30
廣告、資料匯出與關於	31
第 11 章 常見問題與疑難排解	32
附錄 血壓分級、安全與隱私	33
附錄 D 醫療資訊來源	34

關於本說明書

本說明書適用於「我的血壓」1.1 版。畫面截圖以 iPhone 18 Pro Max 模擬器與示範資料製作，實際畫面可能因手機型號、iOS 版本、文字大小設定而略有不同。

認識「我的血壓」

「我的血壓」幫你把量血壓、吃藥、回診這三件每天都要記得的事，整理在一支手機裡。字大、按鈕大，家人也能一起關心。

這個 App 可以幫你做什麼



記錄血壓與心率

手動輸入或拍血壓計自動帶入，馬上告訴你血壓在哪个範圍，並提供建議。



看趨勢、做報告

趨勢圖、早晚平均、分級分布；一鍵產生給醫師看的 PDF 回診報告。



吃藥提醒

像鬧鐘一樣每天準時提醒，通知上直接按「已服用」，也能看服藥率。



回診與出門清單

回診前一晚提醒，出門前逐項確認健保卡、處方箋、藥袋。



慢箋領藥

依健保規則算好每次最早可領日，時間到提醒你去領藥。



家人關心

把今天的血壓、吃藥情況用手機簡訊傳給家人；連續漏服藥可自動傳手機簡訊通知家人。



Apple Watch

在手錶上記錄血壓、勾選吃藥，錶面就能看到今天吃藥了沒。



資料在你手上

資料只存在你的 iPhone，不上傳伺服器；可自行匯出備份檔。

1.1 版新功能

- **拍血壓計自動帶入數字**：對準血壓計螢幕拍一張，數字自動填好（需支援 Apple Intelligence 的 iPhone）。
- **第一次使用設定精靈**：幾個簡單問題，量血壓時間、藥物、回診一次設定好。
- **Apple 健康雙向**：除了寫入，也能讀入藍牙血壓計 App 的紀錄。
- **iPhone 小工具**：主畫面、鎖定畫面就能看到今天吃藥了沒，點一下記錄已服用。
- **722 居家量測**：依台灣高血壓學會建議，陪你完成 7 天、早晚、每回 2 次的量測，並算好平均。
- **家人關心**：「傳給家人」用手機簡訊傳今日摘要；量到危險值時可直接撥 119 或傳手機簡訊給家人。
- **備份與還原**：匯出備份檔，換新手機也能把資料帶過去。
- **醫療資訊來源**：血壓分級、心率判讀與建議旁都附上指引出處，點一下可看原文（見附錄 D）。

使用前準備

項目	需求
iPhone	iOS 17 以上
拍血壓計自動帶入	iOS 27 以上、支援 Apple Intelligence 的 iPhone，並在「設定 > Apple Intelligence 與 Siri」開啟
Apple Watch（選用）	watchOS 10 以上，與 iPhone 配對
血壓計	一般家用電子血壓計即可（上臂式較準確）
下載	App Store 搜尋「我的血壓」（目前於台灣上架）

正確量血壓的方法



坐姿示意：背靠椅背、雙腳平放、手臂與心臟同高

- 1 量測前 30 分鐘不要喝咖啡、抽菸、運動，先上完廁所。
- 2 坐在有靠背的椅子上靜坐 5 分鐘，雙腳平放地面、不要翹腳。
- 3 手臂平放在桌上，壓脈帶綁在上臂、與心臟同高，鬆緊約可伸入一指。
- 4 量測時不說話、不動。
- 5 每回量 2 次、間隔 1 分鐘，兩次都記錄下來。
- 6 固定時間量：早上起床 1 小時內（上完廁所、吃早餐和吃藥前），晚上睡前 1 小時內。

💡 小提醒

這就是台灣高血壓學會推廣的「722 原則」：連續 7 天、每天早晚 2 回、每回 2 次。App 內建「722 居家量測」，會一步步陪你完成，詳見第 5 章。

快速設定

第一次打開 App 時，「設定精靈」會用幾個簡單問題幫你設定好。每一步都可以略過，之後也能在「設定」修改。



- 1 **歡迎畫面**：按「開始設定」。換新手機、手上有備份檔的，按「我有備份檔，要還原資料」（見第 9 章）；想直接使用可按「略過，直接開始」。
- 2 **想用來做什麼**：勾選你需要的功能。沒勾的項目，精靈就不會再問。
- 3 **量血壓時間**：預設早上 7:00、晚上 9:00，可點時間修改或關閉。也可以順便勾「接下來 7 天做 722 量測」。按「下一步」時，iPhone 會詢問是否允許通知，請選「允許」，提醒才會響。



④ 與 Apple 健康同步

⑤ 你現在吃哪些藥

⑥ 下次回診

- 4 與 Apple「健康」同步：勾「把血壓存到健康」，量的血壓會同步到 iPhone 內建的「健康」App；有藍牙血壓計 App 的，可勾「讀入藍牙血壓計的紀錄」。按「下一步」後 iPhone 會詢問要允許哪些資料，請全部打開。
- 5 你現在吃哪些藥：按「新增藥物」，對照藥袋輸入藥名與吃藥時間（詳見第 6 章）。可以一次新增好幾種。
- 6 下次回診：新增回診日期；有慢性病連續處方箋的，也可以在這裡新增（詳見第 7、8 章）。



⑦ 讓家人放心

⑧ 怎麼稱呼你

⑨ 設定好了

- 7 讓家人放心（若有勾選）：設定連續漏服藥時要通知的家人（詳見第 9 章）。
- 8 怎麼稱呼你：填寫後，首頁會跟你打招呼，回診報告上也會印出姓名。可以不填。
- 9 設定好了：畫面會列出剛才設定的提醒。按「現在記錄第一筆血壓」馬上開始，或按「完成」進入首頁。

說明

手機上已經有資料的人（例如從舊版更新、或用 iPhone 備份還原到新手機）不會再看到設定精靈，所有設定都會保留。

介面導覽

畫面最下方有五個分頁，點一下就能切換。以下先認識每個分頁，再逐一說明首頁。

分頁	用途
 今天	首頁。最近一次血壓、今天要吃的藥、即將到來的回診與領藥。
 血壓	趨勢圖、平均值、所有紀錄；匯出回診報告；722 居家量測。
 用藥	「今天吃藥了嗎？」每種藥的服藥時間、勾選已服用、服藥率。
 回診領藥	回診日期、出門前檢查清單、慢性病連續處方箋領藥時程。
 設定	提醒時間、家人通知、Apple 健康、備份、Apple Watch、廣告。

首頁「今天」



首頁上半部

- 問候與日期**
填了稱呼的話會顯示「早安，王媽媽」。
- 傳給家人**
把今天的血壓與吃藥情況整理成一段文字，用手機簡訊傳給家人。
- 最近一次量測**
收縮壓 / 舒張壓與量測時間。
- 血壓分級**
依顏色標示「正常、偏高、第一期」等（對照附錄）。
- 心率**
心率數值與快慢判讀；沒有記錄心率時顯示「未記錄」。
- 建議與資料來源**
依分級給的日常建議；點「查看來源」可看判讀依據的醫學指引。
- 記錄血壓**
大按鈕，點一下開始記錄。
- 今日用藥**
依時間排列，點右邊圓圈就能勾選「已服用」，再點一次可取消。
- 分頁列**
切換五個分頁。



首頁下半部：近 7 天平均、即將到來

- 1 近 7 天平均
最近一週的平均血壓、分級與平均心率。
- 2 下次回診
點一下可到「回診領藥」查看。
- 3 出門前攜帶物品
回診 2 天內出現，點開逐項確認，全部帶齊會顯示「可以出門了」。
- 4 慢箋領藥
顯示下一次領藥的狀態，例如「現在可領第 2 次藥」。

首頁還會視情況出現

- 通知被關閉了：提醒不會響時的紅色提示，按「去開啟通知」即可修正。
- 722 量測進度：量測週期間顯示今天還要量幾次。
- 回診前建議 722：回診前 7~10 天，建議你開始 722 量測。
- 已連續 N 次沒有服藥紀錄：開啟「漏服藥通知家人」後，達到設定次數時出現，可傳手機簡訊給家人。



通知被關閉時的紅色提示



722 量測期間的今日提示

記錄血壓

量完血壓後，點首頁的「記錄血壓」或「血壓」頁右上角的「+」。可以手動輸入，也可以拍血壓計自動帶入。



記錄血壓畫面

手動輸入

操作步驟

- 1 在「收縮壓（高壓）」輸入第一個數字，輸入完會自動跳到下一格。
- 2 依序輸入「舒張壓（低壓）」與「心率（脈搏）」。血壓計沒顯示心率可以不填。
- 3 下方會立刻出現判讀與建議，確認數字無誤。
- 4 需要時修改量測時間、量測手臂，或在備註寫下「剛起床、頭暈」等狀況。
- 5 按右上角「儲存」。

畫面標示

- 1 儲存
數字合理才能按。
- 2 拍血壓計
拍照自動帶入（下一頁）。
- 3 量測數值
收縮壓、舒張壓、心率。
- 4 時間與手臂
預設為現在、左手。

⚡ 小提醒

收縮壓要比舒張壓高，數字不合理時會提醒你再確認，不會存進錯的資料。

拍血壓計自動帶入數字 1.1 新功能

量完血壓後，不必一個一個輸入數字：對準血壓計螢幕拍一張，App 會在手機上辨識數字並填好。



① 把螢幕對準白框



② 核對後儲存

- 1 在記錄畫面按「拍血壓計，自動帶入數字」。
- 2 把血壓計的螢幕放進白框，正面拍、避免反光，按下方白色圓形按鈕。
- 3 約 1~2 秒後，讀到的數字會自動填入。畫面會顯示照片，請對照血壓計確認數字。
- 4 看不清楚的欄位會留空，請自己輸入。確認無誤後按「儲存」。

說明

照片只在這支 iPhone 上辨識，不會上傳，也不會保存。

✓ 容易讀對

- 螢幕佔滿白框，靠近一點
- 正面拍，不要斜拍
- 避開燈光反射，必要時調整角度
- 量完結果還在螢幕上時就拍


✗ 容易讀錯或讀不出來

- 整台血壓計都拍進去、螢幕太小
- 螢幕反光、太暗或背光
- 手晃動造成模糊
- 螢幕已經切換到記憶或日期畫面

⚠ 請核對數字

辨識結果一定要自己核對。App 同一張照片會讀兩次，兩次不一致的數字就不填入，但仍可能有讀錯的情況；數字以血壓計顯示為準。此功能需要 iOS 27 以上、支援並已開啟 Apple Intelligence 的 iPhone，不支援的手機不會出現這個按鈕。

量到危險值時 ($\geq 180 / 120$)

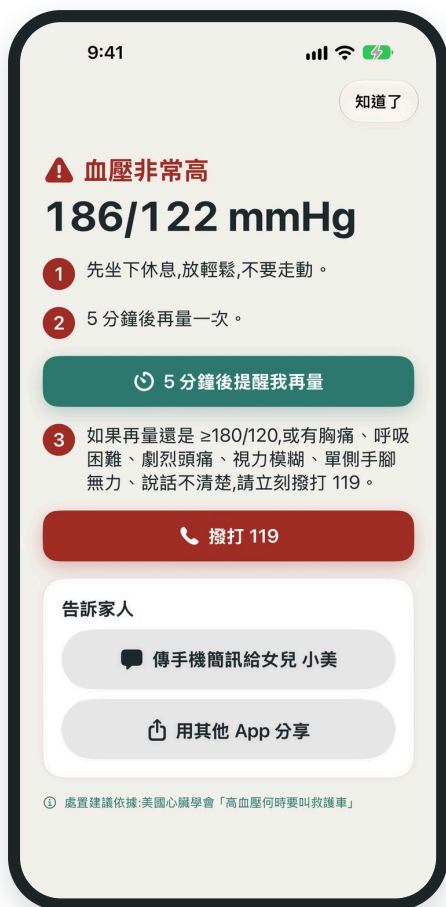

危險值處置畫面

收縮壓 ≥ 180 或舒張壓 ≥ 120 時，儲存後會出現大字的處置步驟：

- 1 先坐下休息，放輕鬆，不要走動。
- 2 按「5 分鐘後提醒我再量」，手機會在 5 分鐘後通知你再量一次。
- 3 如果再量還是 $\geq 180 / 120$ ，或有胸痛、呼吸困難、劇烈頭痛、視力模糊、單側手腳無力、說話不清楚，請立刻按「撥打 119」。
- 4 按「傳手機簡訊給家人」（已設定家人電話時）或「用其他 App 分享」，讓家人知道。

⚠ 重要

本 App 不是醫療器材，無法診斷或治療。身體不舒服時，請以就醫為優先。

▼ 我的血壓 · 5 分鐘前

再量一次血壓

已經休息 5 分鐘了，請坐好再量一次。若仍 $\geq 180/120$ 或有胸痛、呼吸困難、單側無力等症狀，請撥打 119。

▲ 按「5 分鐘後提醒我再量」後收到的通知（示意）。點通知會直接打開「記錄血壓」。

修改或刪除紀錄

- 修改：在「血壓」頁的紀錄列表點一下該筆紀錄，改好後按「儲存」。
- 刪除：在紀錄上長按，選「刪除這筆紀錄」；或在修改畫面最下方按「刪除這筆紀錄」。刪除後無法復原。
- 從 Apple「健康」讀入的紀錄，修改或刪除只影響本 App，不會改動「健康」裡的原始資料。

血壓趨勢、報告與 722 量測

「血壓」分頁把所有紀錄整理成圖表與統計，並能產生給醫師看的報告。



血壓分頁上半部



統計與分級分布

- 1 匯出
回診用 PDF 報告、匯出 CSV (Excel)。
- 2 記錄血壓
新增一筆紀錄。
- 3 722 居家量測
開始 7 天量測 (本章後半)。
不需要可按「不用了」收起。
- 4 期間
7 天、30 天、90 天、全部。
- 5 趨勢圖
紅線收縮壓、藍線舒張壓，虛線為目標 130 / 80。
- 6 顯示心率
打開後圖上多一條心率線。
- 7 統計
平均、平均心率、早上與晚上平均、最高與最低。
- 8 分級分布
各分級各佔幾次。

紀錄列表



紀錄列表

往下捲可以看到每一筆紀錄，依日期分組：

- ☀ 早上、🌙 晚上的量測會分別標示。
- 左側色條與標籤代表分級，右側是心率。
- 📱 表示從 Apple Watch 記錄；❤ 方框圖示表示從 Apple「健康」讀入。
- 點一下可以修改，長按可以刪除。

回診報告 (PDF) 與 CSV

- 1 在「血壓」頁先選好期間（例如 30 天）。
- 2 按左上角「匯出」，選「回診用 PDF 報告」。
- 3 預覽報告後，按右上角分享按鈕即可列印、存到「檔案」或傳給家人、醫院。

報告第 1 頁有整體與早晚平均、最高最低、平均心率、達標比例、趨勢圖、分級分布、目前用藥與服藥率；之後為量測明細。選「匯出 CSV (Excel)」則可用 Excel、Numbers 開啟所有數字。



PDF 報告預覽

722 居家量測 1.1 新功能

單次量測容易受緊張、活動影響。台灣高血壓學會建議回診前在家做「722」：連續 7 天、每天早晚 2 回、每回量 2 次，取平均最能代表平常的血壓。

	第 1 天	第 2 天	第 3 天	第 4 天	第 5 天	第 6 天	第 7 天
☀ 早上 起床 1 小時內 吃藥、早餐前	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
🌙 晚上 睡前 1 小時內	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●

● = 量 1 次；每回量 2 次，中間休息 1 分鐘。7 天共 14 回、28 筆。



① 開始 7 天量測



② 量測中：7 天進度

- 1 在「血壓」頁的「722 居家量測」卡片按「開始 7 天量測」，確認從今天開始。
- 2 接下來 7 天，每天早晚照常記錄血壓。卡片上的格子會打勾：量 2 次打 ✓、只量 1 次顯示「1」。
- 3 沒有設定早上或晚上的提醒時，App 會自動補上 7:00、21:00 的量測提醒。
- 4 想中途停止，按卡片右下角「結束」，已量的紀錄都會保留。

為什麼要量 7 天、早晚分開？

單次量測容易受緊張、活動、睡眠影響；連續 7 天的平均比較能代表平常的血壓。早上、晚上分開平均，也方便醫師判斷吃藥的時間與劑量是否合適。

早上、晚上怎麼算？

早上 4:00~11:59 量的算早上那一回；晚上 18:00 到隔天凌晨 3:59 量的算當天晚上那一回。下午量的不列入 722，但仍會保存在紀錄中。



③ 第 1 次存好，倒數量第 2 次



④ 7 天完成：平均值與報告

每回量 2 次

量測週期間，存好第 1 次後畫面不會關閉，而是顯示**1 分鐘倒數**。休息後直接輸入第 2 次再儲存即可。只想量一次，按「這回只量一次，完成」。



首頁也會提醒今天還要量幾次

完成後

第 7 天晚上之後，卡片會顯示：

- 7 天的**平均血壓**，以及早上、晚上各自的平均。
- 完成了幾回（例如 13 / 14 回）。
- 與居家血壓目標 **130 / 80** 的比較。

- 1 按「產生回診報告」，得到只包含這 7 天的 PDF，回診時給醫師看。
- 2 按「收起，下次再量」結束這次量測。

💡 小提醒

下次回診前 7~10 天，首頁會提醒你開始 722，回診時剛好有一週的平均值。

用藥與吃藥提醒

「用藥」分頁的標題是「今天吃藥了嗎？」。每種藥一張卡片，吃完就勾，App 會準時提醒你。



「用藥」分頁

- 1 新增藥物
- 2 藥物卡片
藥名、類別、劑量；有拍照會顯示照片。點一下可編輯。
- 3 服藥率
近 7 天有按「已服用」的比例。
- 4 服藥時間
時間與顆數。點一下整列就能勾選已服用，再點一次取消。

吃藥提醒通知




▲ 通知示意。長按（或往下拉）通知會出現兩個按鈕：

- 已服用：直接記錄，不必打開 App。
- 10 分鐘後再提醒：10 分鐘後再響一次。

💡 小提醒

提醒像鬧鐘一樣每天重複，不開 App 也會響。提早吃藥並按了「已服用」，當天那個時間就不會再響。


新增藥物

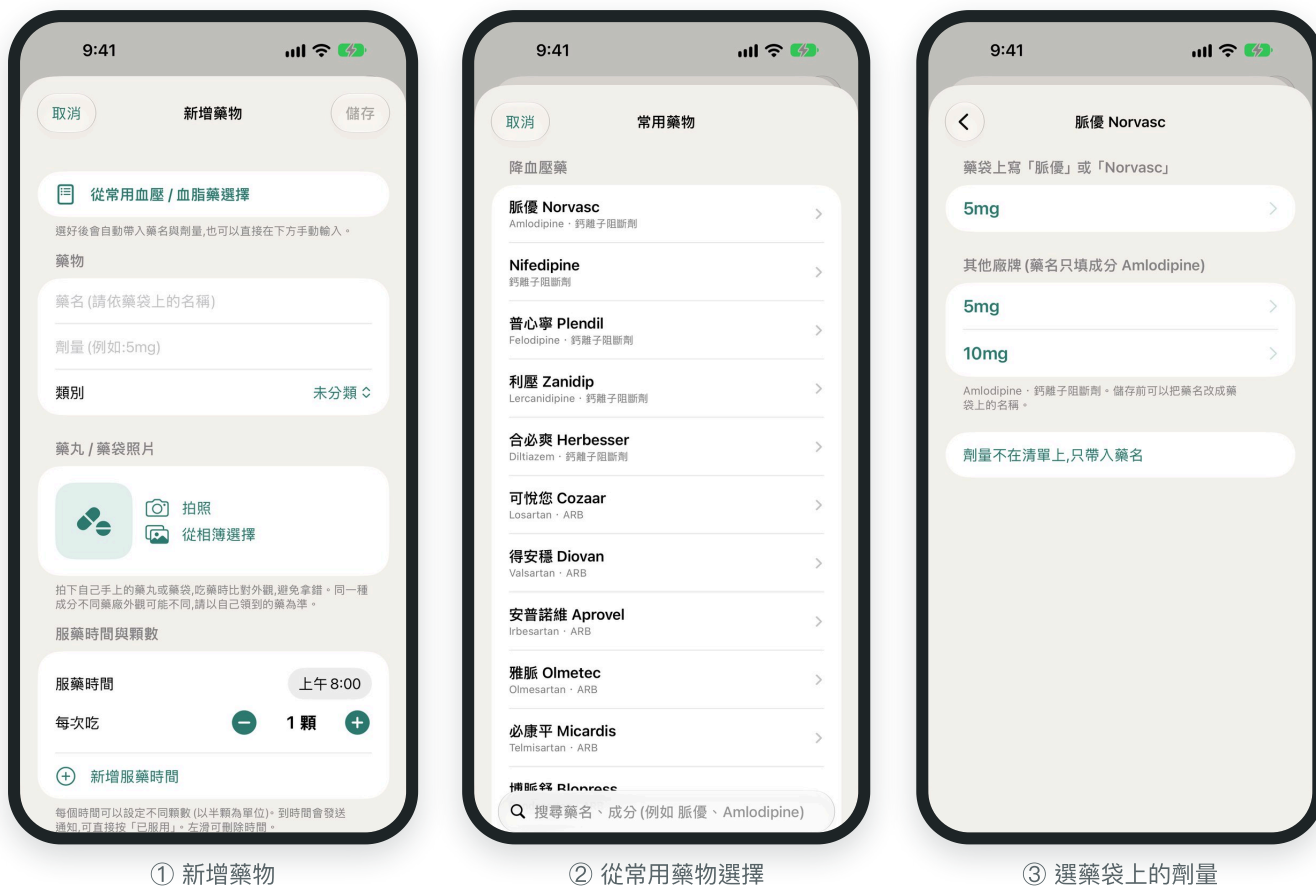

- 1 在「用藥」頁按右上角「+」。
- 2 可直接輸入藥名；或按「從常用血壓 / 血脂藥選擇」，用藥名、成分搜尋（例如「脈優」、「Amlodipine」）。
- 3 選好藥後選劑量：藥袋上寫的是原廠名稱（例如「脈優」或「Norvasc」），就從上面選；是其他廠牌，從下面選，藥名只會帶入成分，儲存前可改成藥袋上的名稱。劑量不在清單上可只帶入藥名。
- 4 設定服藥時間與每次吃幾顆（可選半顆）。一天吃兩次以上，按「新增服藥時間」。
- 5 可按「拍照」拍下藥丸或藥袋，吃藥時方便比對。按右上角「儲存」。

i 說明

常用藥物清單的名稱與劑量，取自食藥署藥品許可證公開資料（2026 年 9 月核對），僅方便輸入；請一律以醫師處方及藥袋標示為準，找不到的藥請直接手動輸入。

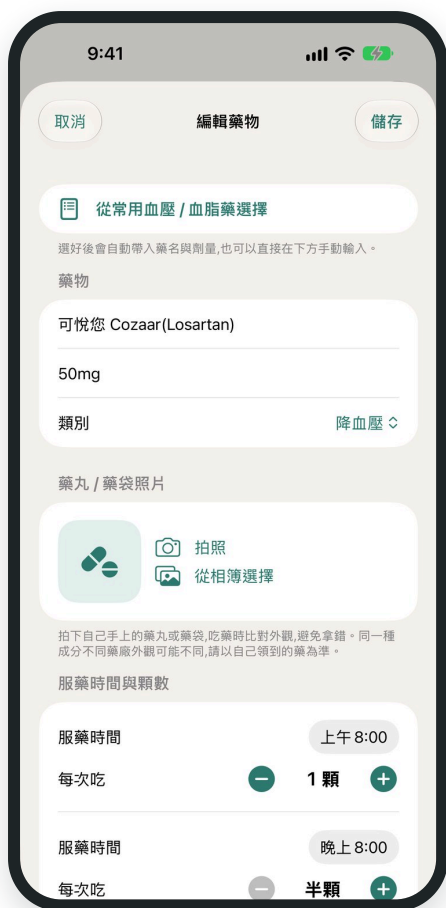

編輯藥物（上半部）



編輯藥物（下半部）

編輯、停用、刪除

- 在「用藥」頁點藥物卡片即可修改藥名、劑量、時間、顆數與照片。
- 醫師暫停某個藥時，關閉「目前服用中」：藥物會保留但不再提醒。
- 不再使用，按最下方「刪除此藥物」；該藥的服藥紀錄也會一併刪除。

⚡ 小提醒

每個服藥時間可以設定不同顆數，例如早上 1 顆、晚上半顆，提醒通知與首頁都會顯示正確顆數。

服藥紀錄與服藥率

- 「已服用」是依你在 App 裡按下的紀錄。按錯了，再點一次同一列就會取消。
- 在通知上按「已服用」、在 Apple Watch 勾選，也都會記錄。
- 服藥率 = 近 7 天已經到時間的服藥中，有按「已服用」的比例；新增藥物之前的時間不算。
- 回診 PDF 報告也會列出每種藥在報告期間的服藥率。

服藥率的顏色

● 90% 以上	綠色
● 70%~89%	橘色
● 未滿 70%	紅色

💡 提醒

沒有按「已服用」不一定代表沒吃，可能只是忘了按。服藥率是幫助自己養成習慣、讓醫師參考的工具。

回診與出門前檢查

「回診領藥」分頁上方可以切換「回診」與「慢箋領藥」。先說明回診。




回診列表



新增 / 編輯回診

- 1 在「回診領藥」頁按右上角「+」。
 - 2 選擇看診日期與時間，輸入醫院、科別、醫師。
 - 3 設定提醒：前一天晚上 8 點提醒、看診前幾小時提醒。
 - 4 按「儲存」。
- 看完診可以在卡片上長按標記「已看診」或刪除。

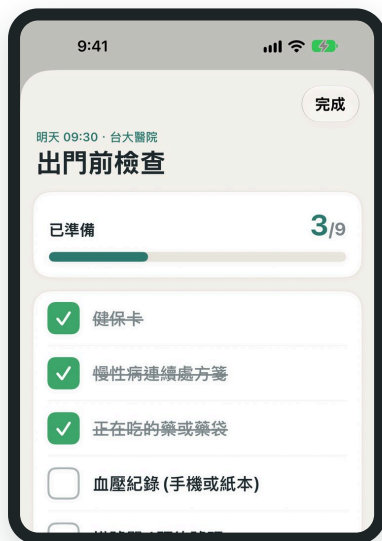

出門前檢查清單

出門前檢查清單

- 1 回診前一晚的提醒通知、首頁或回診卡片上的「出門前檢查攜帶物品」都能打開清單。
- 2 每帶好一樣就點一下打勾：健保卡、慢性病連續處方箋、藥袋、血壓紀錄、老花眼鏡……
- 3 全部打勾會顯示綠色的「可以出門了」。

💡 小提醒

預設清單可以在「設定 > 預設攜帶物品清單」修改，之後新增的回診都會套用。

慢性病連續處方箋領藥

有慢箋（通常每次 28 或 30 天、共 3 次）時，App 依健保規則算好每次什麼時候可以領藥，並提醒你。



慢箋列表



慢箋詳細資料與領藥時程

- 1 在「回診領藥」頁切換到「慢箋領藥」，按「+」新增。
- 2 輸入開立醫院、領藥地點、開立日期、**第 1 次領藥日**、每次給藥天數、總共可領次數。
- 3 每次領完藥，在詳細資料頁按「已領藥」並選日期。

提醒時間（早上 9 點）

- 可以開始領下一次藥的第一天
- 手邊的藥 3 天內會吃完、還沒領時
- 全部藥物用完前 7 天（提醒安排回診開新處方）

可以領藥的日期怎麼算？

依健保署規定：第 2 次起，須在上次給藥期間屆滿前 10 日內領取（屆滿當日不算）。以 6/1 領 30 天份、共 3 次為例：

▲ 提早領：仍要把前次的藥吃完，不影響之後的時程。

第 1 次藥 6/1—6/30

第 2 次藥 7/1—7/30

第 3 次藥 7/31—8/29

6/20—6/30

第 2 次可領

7/20—7/30

第 3 次可領

處方箋有效到最後一次的用藥末日（本例 8/29）；晚領仍可在有效期間內領，但之後的時程會往後延。

狀態說明

還有 N 天可領	還沒到可以領的日子
現在可領	可以去領了，建議在手邊的藥吃完前領
還沒領	手邊的藥應已吃完，處方箋仍有效，請盡快領
處方箋已過期	無法再領，請回診

說明

春節等連續假期，健保署可能另外公告提早領藥。遇到時可在慢箋的「編輯」中暫時調整「藥吃完前幾天起可領」。

小提醒

詳細資料頁的「安排回診開新處方」會帶入醫院與建議日期（藥物用完前 7 天）。

以這個例子，App 會在這些時間提醒你（早上 9:00）

日期	通知	什麼時候會收到
6/20	今天起可以領第 2 次慢箋藥	可以領下一次藥的第一天
6/28	慢箋藥快吃完了	手邊的藥 3 天內會吃完、第 2 次還沒按「已領藥」時
7/20	今天起可以領第 3 次慢箋藥	第 2 次已領，可以領第 3 次的第一天
8/23	慢箋藥物 7 天後用完	整張處方的藥全部用完前 7 天，提醒安排回診請醫師開新處方

領藥後記得在 App 按「已領藥」，後面的提醒才會跟著更新。

家人關心

長輩自己用，家人也能放心。三種方式讓家人知道長輩的狀況，全部不需要註冊帳號，也不經過我們的伺服器。



1. 傳給家人（隨時）

首頁右上角的「傳給家人」會產生一段今日摘要，按「傳手機簡訊」會打開 iPhone 的「訊息」App 並帶好內容與家人電話，按「傳送」即可：

【我的血壓】王媽媽的 9/28（週一）

最近一次：132/84 mmHg、心率 72（今天 07:15）· 高血壓1期

近 7 天平均：131/83（9 筆）

今天吃藥：2/4 已記錄

過了時間還沒按「已服用」的藥也會列出來。

2. 量到危險值時

危險值處置畫面上有「傳手機簡訊給家人」（已設定家人電話時）與「用其他 App 分享」，讓家人馬上知道。

3. 連續漏服藥時自動通知

連續幾次沒有按「已服用」時，自動傳手機簡訊給家人，請他們打電話關心。設定方式見下一頁。



「傳給家人」畫面

說明

簡訊內容會寫「沒有服藥紀錄（可能未服藥，也可能吃了但忘了在 App 按「已服用）」，提醒家人先打電話確認。

設定「漏服藥通知家人」



① 聯絡人與門檻

② 訊息預覽

③ 捷徑設定教學


- 1 到「設定 > 漏服藥通知家人」，打開「連續漏服藥時通知家人」。
- 2 填寫你的稱呼（例如「媽媽」）、家人姓名與手機號碼；設定**連續漏服幾次就通知**、**超過服藥時間多久算漏服**（預設 2 小時）。
- 3 因為 iPhone 不允許 App 在背景自動傳手機簡訊，需要用 iPhone 內建的「捷徑」App 設定一次自動化：依畫面上的 6 個步驟，建立「每天固定時間」執行「檢查是否漏服藥」，結果包含「未服藥」時用「訊息」App 傳手機簡訊給家人。
- 4 完成後，達到門檻時會自動傳手機簡訊；同一次漏服只會傳一次。

⚠ 限制


手機關機、沒電或沒有訊號時無法傳送。捷徑 App 的畫面名稱可能因 iOS 版本略有不同。

設定、Apple 健康、備份與 Apple Watch

「設定」分頁集中了所有提醒與資料相關的選項，往下捲動可以看到全部項目。

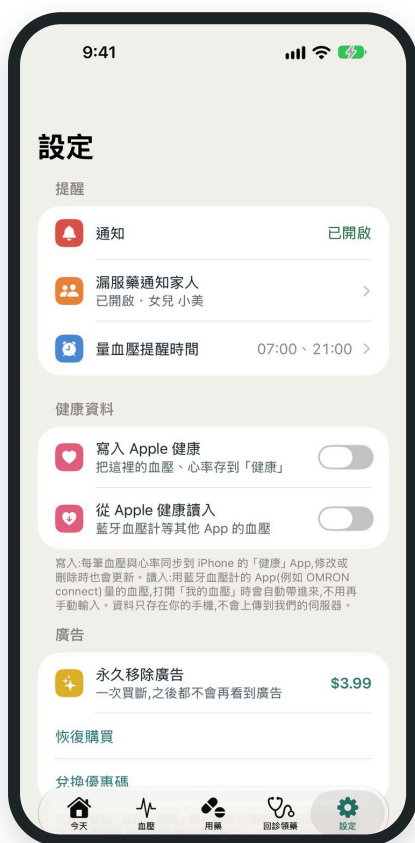

設定（上段）

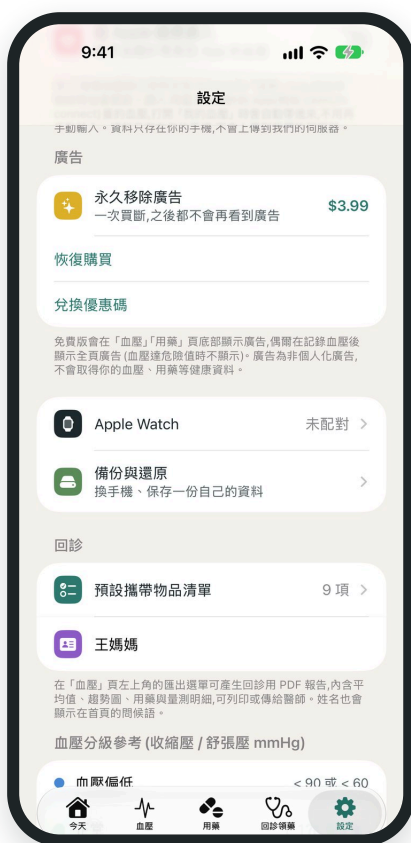


設定（中段）



設定（最下方）

項目	說明	項目	說明
通知	「已開啟」代表提醒會響；顯示紅色「允許通知」時點一下前往開啟。	Apple Watch	連線狀態、立即同步。
漏服藥通知家人	見第 9 章。	備份與還原	匯出備份檔、從備份檔還原。
量血壓提醒時間	新增、修改、關閉每天的量測提醒。	回診	預設攜帶物品清單、回診報告上的姓名。
健康資料	寫入 / 讀入 Apple「健康」。	血壓分級參考	各分級的收縮壓 / 舒張壓範圍。
廣告	永久移除廣告、恢復購買、兌換優惠碼。	資料・關於	匯出全部血壓紀錄 (CSV)、紀錄筆數、醫療資訊來源、使用聲明與版本。

量血壓提醒時間

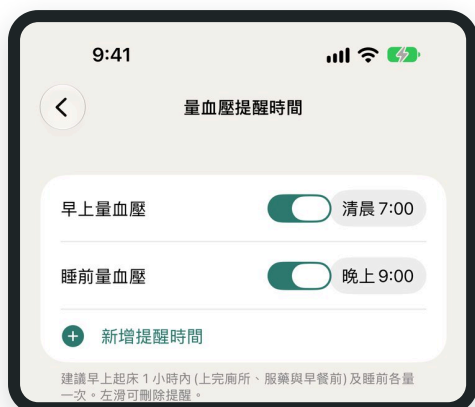

量血壓提醒時間

- 1 到「設定 > 量血壓提醒時間」。
- 2 點時間可修改，點名稱可改成「早上量血壓」等；右邊開關可暫停。
- 3 按「新增提醒時間」可多設幾個；在提醒上向左滑可刪除。

▼ 我的血壓 · 現在

早上量血壓

請先靜坐 5 分鐘再量測，記得同時記錄心率。

▲ 通知示意。點通知會直接打開「記錄血壓」畫面。

所有提醒一覽

提醒	時間	說明
量血壓	自訂，預設 7:00、21:00	每天重複。722 量測期間會提醒量 2 次。
吃藥	每種藥的服藥時間	每天重複；通知上可按「已服用」「10 分鐘後再提醒」。
回診	前一天 20:00、看診前 N 小時	點通知直接打開出門前檢查清單。
慢箋領藥	早上 9:00	可領第一天、藥快吃完、全部用完前 7 天。
再量一次	量到危險值後 5 分鐘	在危險值畫面按下才會設定。

⚠ 提醒沒有響？

若按了「不允許通知」，或在 iPhone 設定中關閉，所有提醒都不會響。首頁會出現紅色提示，按「去開啟通知」即可修正。開啟「專注模式」或「睡眠模式」時，提醒也可能不會跳出。

Apple「健康」



設定 > 健康資料

寫入 Apple 健康

打開後，每筆血壓與心率都會同步到 iPhone 的「健康」App，修改或刪除時也會一併更新；打開時會把以前的紀錄全部補寫進去。關閉後，已寫入的資料會保留在「健康」App。

從 Apple 健康讀入 1.1

使用藍牙血壓計的 App（例如 OMRON connect）量的血壓，只要已同步到「健康」，打開「我的血壓」時就會自動帶進來，不用再手動輸入。

- 同一筆不會重複讀入；本 App 自己寫入的也不會讀回來。
- 找不到心率的紀錄會顯示「未記錄」。
- 在本 App 刪除讀入的紀錄，之後不會再讀入，也不會刪到「健康」裡的資料。
- 按「立即讀取」可以手動讀一次。

小提醒

打開開關時 iPhone 會詢問要允許哪些資料，請把「血壓」「心率」都打開。讀不到資料時，可到「健康」App > 右上角頭像 > 「App」> 「我的血壓」檢查。



第一次使用時，設定精靈也會詢問

藍牙血壓計的紀錄怎麼進來？

- 1 用血壓計的 App（例如 OMRON connect）量完血壓，並確認該 App 已開啟同步到「健康」。
- 2 打開「我的血壓」，新紀錄會自動帶入，列表上有 方框圖示。
- 3 讀入的紀錄可以加備註或修改，只影響「我的血壓」。

備份與還原

1.1 新功能



設定 > 備份與還原

你的資料存在哪裡

資料只存在這支 iPhone，不會上傳到任何伺服器。iPhone 本身的「iCloud 備份」或電腦備份會包含本 App 的資料。

匯出備份檔

- 1 按「匯出備份檔」。
- 2 選擇存到「檔案」App（可選 iCloud 雲碟），或用 Email 等方式傳給自己或家人。

從備份檔還原

- 1 按「從備份檔還原」，選擇備份檔。
- 2 確認備份時間與內容後按「還原」。

還原是「合併」：手機上沒有的紀錄才會加入，已經有的保持不變，不會刪除任何資料；重複還原也不會多出重複紀錄。

⚠ 保管備份檔

備份檔含有血壓、用藥等健康資料，請妥善保管，不要傳給不相關的人。

換新手機時

方法一：iPhone 整機移轉

用 iCloud 備份還原或「快速開始」移轉到新 iPhone，「我的血壓」的資料與設定會一起過去，不會再出現設定精靈。

方法二：備份檔

在舊手機「匯出備份檔」，新手機安裝 App 後，在設定精靈第一頁按「我有備份檔，要還原資料」，或到「設定 > 備份與還原」還原。

iPhone 主畫面與鎖定畫面小工具 1.1 新功能

不用打開 App，在主畫面就能看到今天吃藥了沒；中尺寸小工具還能直接點圓圈記錄已服用。



小尺寸：今日進度與下次吃藥



中尺寸：點圓圈就記錄已服用

加入小工具

- 1 在主畫面空白處長按，直到圖示開始晃動。
- 2 點左上角「編輯」→「加入小工具」。
- 3 搜尋「我的血壓」，左右滑動選擇尺寸，按「加入小工具」。
- 4 鎖定畫面：長按鎖定畫面→「自訂」→點時間下方的小工具區域加入。

可以選的小工具

- 今天吃藥了嗎？：小、中尺寸與鎖定畫面。
- 最近血壓：最近一次血壓與分級，點一下開始記錄。

說明

小工具的資料由 App 更新。剛新增或修改藥物後，打開 App 一次，小工具就會跟著更新。

Apple Watch

安裝 iPhone App 後，配對的 Apple Watch 會自動安裝「我的血壓」。資料存在 iPhone，手錶透過藍牙與 iPhone 同步。



主畫面



記錄血壓



今日用藥

主畫面

最近一次血壓、今日用藥進度、下次回診與慢箋領藥。

記錄血壓

轉動數位錶冠調整數字；心率會自動帶入手錶 15 分鐘內量到的心率（顯示「心率取自手錶」）。按儲存後同步回 iPhone。

今日用藥

點一下就勾選已服用，iPhone 上也會同步。

錶面小工具

在錶面上長按 > 「編輯」> 選擇要放小工具的位置 > 找到「我的血壓」。

- **今天吃藥了嗎？**：圓形顯示今日服藥進度；方形顯示下次吃藥時間與藥名，時間過了還沒吃會顯示「還沒吃」。
- **最近血壓**：最近一次血壓與分級顏色。

說明

手錶上的資料來自 iPhone。若手錶顯示「請在 iPhone 開啟我的血壓」，打開 iPhone 上的 App 一次即可同步；或到「設定 > Apple Watch」按「立即同步到 Apple Watch」。

廣告與移除廣告



設定中的廣告區塊

「我的血壓」免費提供所有功能，以少量廣告維持開發：

- 「血壓」與「用藥」頁最下方有橫幅廣告。
- 新增血壓紀錄後，偶爾出現全螢幕廣告（最多每 2 筆一次、間隔 3 分鐘以上）；量到危險值時不會出現廣告。
- 只放非個人化廣告，廣告商不會取得你的血壓、用藥等健康資料。

永久移除廣告

- 1 到「設定」的廣告區塊，按「永久移除廣告」。
- 2 依 App Store 畫面完成購買（一次買斷）。
- 3 換手機或重新安裝後，按「恢復購買」即可。

有優惠碼可按「兌換優惠碼」。

資料匯出與關於



設定最下方：資料與關於

匯出全部血壓紀錄 (CSV)

在「設定 > 資料」按「匯出全部血壓紀錄 (CSV)」，會把所有血壓紀錄匯出成 Excel 可以開的檔案，方便自己整理或提供給醫療人員。下方會顯示目前的紀錄筆數。

匯出 CSV 與備份檔有什麼不同？

- CSV：只有血壓紀錄，給人看、用 Excel 開。
- 備份檔：包含血壓、藥物、服藥紀錄、回診、慢箋與設定，用來換手機或還原（見前面「備份與還原」）。

關於

顯示使用聲明與 App 版本。回報問題時，請一併提供版本號碼。

常見問題與疑難排解

Q · 提醒沒有響？

確認「設定」最上方的「通知」為「已開啟」；首頁出現「通知被關閉了」時按「去開啟通知」。另外檢查 iPhone 是否開啟專注模式、睡眠模式，以及提醒時間是否正確。

Q · 拍血壓計讀不出數字或讀錯？

靠近一點讓螢幕佔滿白框、正面拍、避開反光，並在量完結果還顯示時拍。讀錯的數字直接修改即可；辨識結果一定要核對。看不到拍照按鈕，代表手機不支援或未開啟 Apple Intelligence。

Q · 服藥率是怎麼算的？

依你在 App 裡按「已服用」的紀錄計算。沒按不一定代表沒吃，報告上也會註明。新增藥物之前的時間不會算進去。

Q · 一支手機可以給兩個人用嗎？

目前一個 App 記錄一個人的資料。家中兩位長輩建議各自使用自己的手機。

Q · Apple Watch 沒有同步？

打開 iPhone 上的 App 一次；確認手錶與 iPhone 已配對且藍牙開啟；或到「設定 > Apple Watch」按「立即同步」。

Q · 字太小看不清楚？

到 iPhone「設定 > 螢幕顯示與亮度 > 文字大小」調大，App 的文字會跟著放大，排版也會自動調整。

Q · 按錯「已服用」怎麼辦？

在首頁或「用藥」頁再點一次那一系列，就會取消。

Q · 血壓計沒有顯示心率可以嗎？

可以，心率欄位空著也能儲存，會記為「未記錄」，不影響平均與判讀。

Q · 刪錯紀錄可以復原嗎？

刪除後無法復原。建議定期在「設定 > 備份與還原」匯出備份檔。

Q · 換新手機資料會不見嗎？

用 iPhone 整機移轉或 iCloud 備份還原，資料會一起過去；也可以用備份檔還原（第 10 章）。

Q · 「健康」App 的血壓讀不進來？

確認「設定 > 健康資料」的「從 Apple 健康讀入」已打開，並在「健康」App > 頭像 > 「App」> 「我的血壓」允許讀取血壓與心率。

Q · 我的資料會被上傳嗎？

不會。資料只存在你的 iPhone（開啟時會同步到 Apple「健康」與 Apple Watch）；拍照辨識也在手機上完成。

附錄 A 血壓分級對照表

單位 mmHg。門檻參考 2022 台灣高血壓治療指引與 ACC/AHA 2017（居家量測），僅供自我追蹤參考，實際控制目標以醫師設定為準。收縮壓與舒張壓分屬不同等級時，以較高的等級為準。

分級	收縮壓 / 舒張壓	建議
● 血壓偏低	< 90 或 < 60	若有頭暈、眼前發黑或疲倦，請坐下休息並告知醫師。
● 正常	< 120 且 < 80	請繼續保持規律服藥與生活習慣。
● 血壓偏高	120–129 且 < 80	建議減鹽、規律運動、控制體重並持續追蹤。
● 第一期高血壓	130–139 或 80–89	確實服藥，每天早晚量測，回診時提供紀錄。
● 第二期高血壓	≥ 140 或 ≥ 90	確認是否按時服藥；持續偏高請提早回診。
● 高血壓危險值	≥ 180 或 ≥ 120	靜坐 5 分鐘後再量；仍過高或有症狀立即就醫或撥 119。

心率：< 60 次 / 分為偏慢、60–100 為正常、> 100 為偏快。

附錄 B 安全聲明

- 「我的血壓」是個人紀錄與提醒工具，**不是醫療器材**，不量測血壓、不做診斷，也不能取代醫師的專業判斷。
- 用藥、劑量與回診請一律遵照醫師指示與藥袋標示。
- 出現胸痛、呼吸困難、劇烈頭痛、單側無力、說話不清等症狀，請立即就醫或撥打 119。

分級、建議與提醒規則的來源，見附錄 D；App 內也可在「設定 > 關於 > 醫療資訊來源」查看並開啟原文。

附錄 C 隱私

- 血壓、用藥、回診等資料只存在你的 iPhone，不會上傳到開發者的伺服器。
- 開啟時會同步到 Apple「健康」App 與你的 Apple Watch；備份檔由你自己決定存放位置。
- 拍血壓計的照片只在手機上辨識，不上傳、不保存。
- 廣告為非個人化廣告，不會取得健康資料。完整隱私權政策請見官網。

支援與聯絡

官網：getesimmanager.com/bpcare · 支援：getesimmanager.com/bpcare/support.html

附錄 D 醫療資訊來源

App 內的血壓分級、心率判讀、建議與提醒規則依據下列公開資料（2026 年 9 月確認）。App 裡每個判讀旁的「資料來源」連結，或「設定 > 關於 > 醫療資訊來源」都可以開啟原文。

來源	用於 App 的	網址
2022 台灣心臟學會與台灣高血壓學會高血壓治療指引 Wang TD, et al. Acta Cardiologica Sinica 2022;38(3):225–325	血壓分級門檻(居家血壓 130/80)、生活建議、722 量測方式	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9121756/
2017 ACC/AHA 成人高血壓預防、偵測、評估與治療指引 Whelton PK, et al. Hypertension 2018;71:e13–e115	血壓分級(正常、偏高、第一期、第二期)	https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYP.0000000000000065
Understanding Blood Pressure Readings(解讀血壓數值) 美國心臟學會 American Heart Association	血壓分級與危險值($\geq 180/120$)	https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings
Low Blood Pressure(低血壓) 美國國家心肺血液研究所 NHLBI, NIH	血壓偏低($< 90/60$)	https://www.nhlbi.nih.gov/health/low-blood-pressure
When to Call 911 About High Blood Pressure(高血壓何時要叫救護車) 美國心臟學會 American Heart Association	危險值時的處置與需要立即就醫的症狀	https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings/when-to-call-911-for-high-blood-pressure
All About Heart Rate(關於心率) 美國心臟學會 American Heart Association	靜止心率 60–100 次/分為一般範圍	https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/the-facts-about-high-blood-pressure/all-about-heart-rate-pulse
Pulse(脈搏) 美國國家醫學圖書館 MedlinePlus	心率偏慢(< 60)、偏快(> 100)	https://medlineplus.gov/ency/article/003399.htm
血壓要管理 722 在家量 衛生福利部國民健康署	722 居家量測(連續 7 天、早晚各 1 回、每回 2 次)	https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=4705&pid=16550&sid=16573
Home Blood Pressure Monitoring(居家量血壓) 美國心臟學會 American Heart Association	居家量血壓的正確方法	https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings/monitoring-your-blood-pressure-at-home
門診特定藥品重複用藥費用管理方案(含慢箋提前 10 日領藥計算說明) 衛生福利部中央健康保險署	慢性病連續處方箋可領藥日期的計算	https://www.nhi.gov.tw/ch/dl-86846-62e3ad899cfb4bf8a4187af356a765c6-1.pdf
全部藥品許可證資料集(開放資料) 衛生福利部食品藥物管理署	常用藥物清單的藥名與劑量	https://data.fda.gov.tw/

以上資料均為公開文件；本 App 依其內容整理為居家自我追蹤用的簡明說明，實際診斷與治療請以醫師建議為準。



我的血壓

血壓紀錄 · 吃藥提醒 · 回診慢箋

使用說明書 版本 1.1 · 2026 年 10 月

© 2026 Tsung Ying Tu